

ஸ்வாப் சுய-பரிசோதனை வழிமுறைகள்


BD VERITOR ஏண்டிஜன் விரைவுப் பரிசோதனை



பின்வருவன இருப்பின், பரிசோதனையை மேற்கொள்ள வேண்டாம்:



கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மூக்கில் இரத்தம் வடிதல்

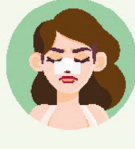

கடந்த 4 வாரங்களில் நாசி அறுவைச் சிகிச்சை



கடந்த 8 வாரங்களில் முகத்தில் காயம்

ஸ்வாப் பரிசோதனை வழிமுறை

- 1** தயவுசெய்து, பரிசோதனையைத் தொடங்குவதற்கு முன், உங்கள் கைகளைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்.
- 2** பரிசோதனையைத் தொடங்குவதற்கு முன், தயவுசெய்து ஒரு ஸ்வாப் குச்சி, ஒரு வடிப்புக் குழாய், ஒரு பரிசோதனைப் பொதியுறை ஆகியவற்றை வெளியே எடுக்கவும். வடிப்புக் குழாயின் மூடியைத் தளர்த்தி, பரிசோதனைப் பொதியுறையைப் பொட்டலத்திலிருந்து வெளியே எடுக்கவும்.
- 3** ஸ்வாப் குச்சியைப் பொட்டலத்திலிருந்து எடுக்கவும்.
- 4** ஸ்வாப் குச்சியை மூக்கின் ஒரு துளைக்குள், சுமார் 2.5 சென்டிமீட்டர், மென்மையாகச் சுழற்றுங்கள். மூக்குத்துளையில் உள்ள அக்குச்சியை 5 முறை சுழற்றி, 5 வினாடிகள் மூக்குத் துளைக்குள்ளேயே வைத்திருக்கவும்.
- 5** அதே ஸ்வாப் குச்சியை மற்றொரு மூக்குத்துளையிலும் சுழற்றவும்.
- 6** ஸ்வாப் குச்சியை வடிப்புக் குழாய்க்குள் செருகிக் கலக்கவும். ஸ்வாப் குச்சியை மேலும் கீழுமாக, 15 வினாடிகளுக்கு அமிழ்த்தவும்.
- 7** ஸ்வாப் குச்சியை வெளியே எடுக்கும்போது, வடிப்புக் குழாயைக் அமுக்கவும்.
- 8** வடிப்புக் குழாயின் மூடியை இறுக்கமாக மூடவும். நீங்கள் ஒரு 'கிளிக்' ஒலியைக் கேட்க வேண்டும்.
- 9** உங்கள் விரலால் குழாயின் பக்கவாட்டில் சில முறை மெல்லத் தட்டுங்கள். திரவத்தைக் கலக்குவதற்கு இது உதவும்.
- 10** பரிசோதனைப் பொதியுறையில் உள்ள சிறு குழிக்குள் 3 துளி திரவத்தைப் போடுங்கள். இதைச் செய்து முடித்தவுடன் வடிப்புக் குழாய் முனை மூடியை மூடிவிடுங்கள்.
- 11** பரிசோதனைப் பொதியுறையில் முடிவுகளைச் சரிபார்க்கும் முன், 15 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். இந்தக் கட்டத்தின்போது, பொதியுறையைத் தட்டையான ஒரு மேற்பரப்பில் வைத்திருங்கள்.
- 12** பரிசோதனைப் பொதியுறையில் உள்ள முடிவுகளைப் படியுங்கள். 'C' மற்றும் 'T' ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலும் ஒரு வரி தோன்றுவதை நீங்கள் கண்டால், இது உறுதிபடுத்தப்பட்ட கிருமித்தொற்றைக் குறிக்கும். தயவுசெய்து மருத்துவரிடம் செல்லுங்கள்.
- 13** பயன்படுத்தப்பட்ட பரிசோதனைப் பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பைக்குள் போட்டு, ரப்பர் பாண்ட் அல்லது கேபிள் நாடாவுடன் அதைக் கட்டுங்கள். கட்டிய பையை மற்றொரு பிளாஸ்டிக் பைக்குள் வைத்து, இரண்டாவது பையையும் ரப்பர் பாண்ட் அல்லது கேபிள் நாடாவுடன் கட்டுங்கள். உடனடியாக அதைக் குப்பைத்தொட்டியில் வீசிவிடுங்கள்.
- 14** பரிசோதனைக்குப் பிறகு, உங்கள் கைகளைச் சுத்தம் செய்யுங்கள்.

நீங்கள், காணொளி வழிமுறைகளுக்கு இந்த விரைவுத் தகவல் குறியீட்டையும் ஒளிவருடலாம்.

